
55% - 1Day

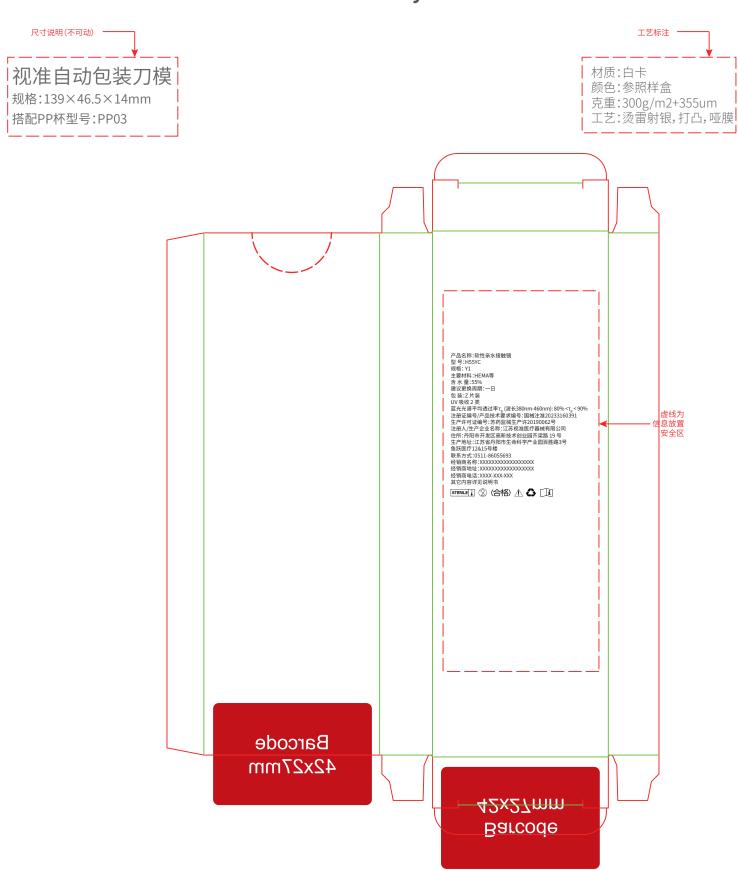

55% -1Day 说明书

色彩:

软性亲水接触镜使用说明书

产品技术要求编号1国接注准20233160391



[日南沙山八千/山山田東省「八世市」並用發電化水向時分也等時期與及子並突回也級反攻"強力法。 (日南沙山八千/山山田東省「八世市」並用各种開展集態,以開設的性質機性炎症,养光期、危疑。 以下能水不能影響本产品。1 患有各种開展疾患,以開設的性質機性炎症,养光期、免疑。 與原力整整地大學症。 中國主義 是一個主義 是一個主意 是一個主義 是一种主義 是一种主義 是一种主义。但是一种主义是一种主义是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但是一种主义,但

表1 配敷时间表							
开始戴镜天数	1	2	3	4	5	6	
戴用时间(小时)	4	6	8	10	12	12	

1.通守配數時间。日號班片門蘇號時輕、初賴或长时间停號店再載書,建议从每天載 小时开始。可相据配號 情况每天辦加 2 小時7.建议一次配線最长不超过數日最长时间。配戴时间因人而另,不要超时散戲。3 如果中 途长时间间隔距离。则完全方定是數可顯新形成。 信使能轉改组成[閩門设计描述:銀片为单馬。球面鎖片,具有挑篮光功能镜片。鏡片相读·信息见下表2

农2规户 怕天后总		
内容名称	内容或单位	
镜片材料	HEMA, MAA, EGDMA, 2-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxy-ph ethyl methyacrylate、Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine 2,2-Diethoxyacetophenone及着色剂	
保存液类型	氯化钠、磷酸二氢钠、磷酸一氢钠、柠檬酸钠、聚乙二醇、泊洛沙姆、羟 甲基纤维素及纯化水调配而成	丙基

后顶焦度范围	0.00D至-12.00D,步长0.25D
折射率	1.410
含水量	55%
光透过率	模拟使用状态下,光透过率在标准照明体D65和A下分别测定,其结果应都是≥89%
抗紫外线功能	UV吸收2类
颜色	单色:黑色、金黄色、蓝色、绿色、灰色、棕色、紫色。 双色及三色:金黄色、蓝色、绿色、灰色、棕色、紫色。
基弧半径	8.00mm-9.00mm,步长0.10mm
总直径	13.80mm-14.50mm, 步长0.10mm
中心厚度	见表2续
透氧系数	14.7×1011(cm²/s) [mlO₂/(ml·hPa)]=0,19.6×1011(cm²/s) [mlO₂/(ml·mmHg
透氧量	18.3×10°(cm/s) [mlO ₂ /(mlhPa)]戦24.3×10°(cm/s) [mlO ₂ /(mlmmHg)] (-3.000
	波长380nm-460nm: 80% <τ _s < 90%
配戴方式	日戴型
建议更换周期	1日。每天最长戴镜时间不应超过表1中最长时间,同时遵照眼科B 生建议。
灭菌方式	蒸汽湿热灭菌
初包装材料	聚丙烯盒+铝箔纸

ALA MINNOS TOPICA		
后顶焦度范围(D)	中心厚度 (mm)	
0.00D至-2.75D	0.10	
-3.00D至-12.00D	0.08	

[工作原理或作用机理] 软性条水接触镜主要是用于矫正因近视引起的层光不正。在上 这些层水不正中,光线不能连伸的腰底在视网膜上,从而导致极力模糊。当线片置于角 上升,就作为照射面的光光子作,是火学作用结合底外,线线有油磨板在网侧膜上 从而带来了消略的视力。 [包藏内部形] 蓝彩 的包装每盒一片,最小销售包装内的初包装片数会显示于包装上。

符号	说明	符号	说明		
STERRES (蒸汽湿热灭菌	BC或r。	基弧半径		
ΔĹ	警告	F'v	后顶焦度		
LOT	批号	ϕ_r	总直径		
Exp. (≦)	失效日期	t_c	中心厚度		
2	禁止二次使用	(合格)	合格		
∞¶ # MFGD	生产日期	P _X only	爾经医师处方指示使用		
and a	制造商	٥	外盒可回收		
®	如包装破损请勿使用	Ţį.	查阅使用说明书		
疗器操生产许可证编号·茶药监禁生产许20190062号					

医疗器械生产许可证编号: 苏拉监械生产许20190062号 注册/L生产企业属压服务单位: 江苏伊斯佐万指城有限公司 住 所只用防开发应制铁产业级国际探询5号 生产地址: 江苏省丹阳市业由科学产业园百胜路3号鱼跃医疗124.15号楼 帕波编码: 12305693 电话号制: 0511.8055693 传真号用: 0511.8037375 阅址: 无